

BESTSAFE-N95

BS-301

FOLDING MASK

(ชนิดหน้ากากพับทบ)



ป้องกันฝุ่น
PM2.5



ประสิทธิภาพ
การกรอง
> 99%



ปกป้อง
มันใจ



หายใจสะดวก



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.LTD
ดูได้ที่ www.anusornbestsafe.com
www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUMA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากพับทบทรงมาตรฐาน FOLD FLAT MASK

ปกป้องทางเดินหายใจ อย่างมั่นใจ

ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สวมใส่สบาย หายใจสะดวก



กรองฝุ่น และละอองขนาดเล็ก
พับทบ 3 ชั้น
ระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวก ไม่ชื้น
กระชับใบหน้า แบบพอดี สวมใส่สบาย
บรรจุกันพร้อมใช้ สะอาด ถูกสุขอนามัย พกพาสะดวก



เหมาะสำหรับการใช้งาน



งานทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการ

งานอุตสาหกรรม

งานก่อสร้าง

งานเชื่อม / เจียร

งานเกษตรกรรม

- สวมใส่สบาย อ่อนโยนต่อผิว
- ระบายอากาศดี หายใจสะดวก
- ป้องกันฝุ่นและละออง ปั่นใจจากการใช้งาน
- ใช้งานสะดวก พกพาง่าย
- สะอาด ปลอดภัย
- บรรจุกันพร้อมใช้ ถูกสุขอนามัย



ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เซฟตี้แบบครบวงจร

WWW.THAIPPE.COM | WWW.ANUSORNBESTSAFE.COM



CONFINED



HIGH



FIRE



MEDICAL



MASK



GARMENT



DISPOSABLE หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับทบ

RESPIRATOR MASK

MEDICAL GRADE & HOSPITAL & LABORATORY SURGICAL (NON-STERILE)



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PSC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



IDLH = ปริมาณสารเคมีที่เมื่อสูดดมแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และสุขภาพอย่างทันที (Immediately Dangerous to Life and Health)



บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: WWW.BESTSAFE.CO.LTD
WWW.THAIPPE.COM / WWW.ANUSORN.BESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

ประสิทธิภาพของหน้ากากในการกรอง

ตารางที่ 3 การเทียบเคียงประสิทธิภาพของหน้ากากที่ได้รับรองมาตรฐานโดย NIOSH, EU Notified Bodies, TGA, NMPA และ JIS (สำหรับใช้ในการเทียบเคียงคุณสมบัติ N95, สี่เหลี่ยมสำหรับการเทียบเคียงคุณสมบัติ N99)

หน่วยงานที่ ตรวจสอบและ ให้การรับรอง	NIOSH	EU Notified Bodies	TGA	NMPA	JIS
ประสิทธิภาพ ของ Respirators	N95 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 95%)	FFP1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 80%)	P1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 80%)		DS/DL1 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 80%)
	N99 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	FFP2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 94%)	P2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 94%)	KN/KP95 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 95%)	DS/DL2 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 95%)
	N100 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99.97%)	FFP3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	P3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการ กรอง 99%)	KN/KP100 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 99%)	DS/DL3 (ประสิทธิภาพขั้น ต่ำภาพในการกรอง 99%)



N95 USA Standard



FFP2 EU Standard



KN95 China Standard



P2 Australian Standard



KF94, Korea



DS2 Japan



PFF2, Brazil



TIS 2480-2562

หน้ากากพับทบ | MEDICAL GRADE ใช้เพื่อการแพทย์ [BS-301-302]

BESTSAFE N95

BS-301

11-0001



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

BS-301

SERIES : BESTSAFE-N95
FFP2



Efficiency Level
MULTI LAYER
Protection Level
FFP2



PACKAGE : CONTAIN

50 PCS/BOX
500 PCS/CARTON



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากพับทบ | MEDICAL GRADE ใช้เพื่อการแพทย์ [BS-301-302]

■ 01 # ผ้าปิดจมูกแบบพับทบสำหรับทางการแพทย์ N95 อย.ไทย] ยี่ห้อ BESTSAFE

 BEST SELLER!	MODEL : BS-301 BESTSAFE FOLDING MASK , N95 DESCRIPTION ผ้าปิดจมูกแบบสายคล้องหู Size : Asia Fit #BESTSAFE	11-0001 BESTSAFE PACKAGE : CONTAIN 50 PCS/BOX 500 PCS/CARTON	BS-301 N95 - ผ้าปิดจมูกพับทบแบบสายคล้องหู สำหรับทางการแพทย์ (M/L) # BESTSAFE [50 PCS/BOX] หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับการป้องกันสิ่งปนเปื้อนอนุภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการป้องกันทางเดินหายใจ ของบุคลากรทางการแพทย์ ทางระบบทางเดินหายใจ การบรรจุ : 50 ชิ้น / กล่อง , 500 ชิ้น / ลัง	ไม่มีवास	BESTSAFE BS-301 [M/L] SERIES : BESTSAFE-N95 FFP2 ใบอนุญาต อย. เลขที่ 67-1-3-2-0000311	
 BEST SELLER!	MODEL : BS-302 #S/M BESTSAFE FOLDING MASK , N95 DESCRIPTION ผ้าปิดจมูกแบบสายคล้องหู Size : Asia Fit #BESTSAFE	11-0002 BESTSAFE PACKAGE : CONTAIN 50 PCS/BOX 500 PCS/CARTON	BS-302 N95 - ผ้าปิดจมูกพับทบแบบสายคล้องหู สำหรับทางการแพทย์ (S/M) # BESTSAFE [50 PCS/BOX] หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สำหรับการป้องกันสิ่งปนเปื้อนอนุภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการป้องกันทางเดินหายใจ ของบุคลากรทางการแพทย์ ทางระบบทางเดินหายใจ การบรรจุ : 50 ชิ้น / กล่อง , 500 ชิ้น / ลัง	ไม่มีवास	BESTSAFE BS-302 [S/M] SERIES : BESTSAFE-N95 FFP2 ใบอนุญาต อย. เลขที่ 67-1-3-2-0000311	

หน้ากากพับทบ | MEDICAL GRADE ใช้เพื่อการแพทย์ [BS-301-302]



RECOMMENDATION & FEATURES

- Folding mask (ชนิด หน้ากากพับทบ)
- Particle filter meltblown efficiency >99% (ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน ขึ้นมาลบอมากกว่า 99%)
- Suitable for general medical use to prevent germs. (เหมาะสำหรับใช้ทางการแพทย์ทั่วไปเพื่อป้องกันเชื้อโรค)
- Suitable for industrial use (เหมาะสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม)



SPECIAL DEVICE OF MEDICAL FACE MASK (ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องมือแพทย์)

- Medical mask Classified as a medical device used for Preventing contamination of both large and small particles from entering the body of doctors and patients through the respiratory system (หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จัดเป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้สำหรับการป้องกันสิ่งปนเปื้อนทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายของแพทย์และคนไข้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ)

Efficiency Level
MULTI LAYER
Protection Level
FFP2 99.9%

ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution
BESTSAFE - N95
50 pcs/ box | 500 pcs/ carton




หน้ากากพับทบ | MEDICAL GRADE ใช้เพื่อการแพทย์ [BS-301-302]




MODEL : BESTSAFE - N95
NO CARBON (WHITE COLOR)

5 LAYER

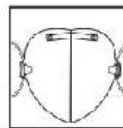

See information
supplied by the
manufacturer

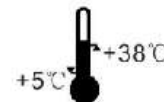

Temperature range
of storage
conditions



Maximum relative
humidity of storage
conditions



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่ : www.thaippe.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDD



LINOFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONTAINER



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPE Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากพับทบ | MEDICAL GRADE ใช้เพื่อการแพทย์ [BS-301-302]

MASK BESTSAFE SERIES: BESTSAFE-N95
MEDICAL | HOSPITAL AND MULTI PURPOSE USE



อย.ไทย | THAILAND FDA



เบสโตเซฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution


BS-301
SERIES : BESTSAFE-N95
FFP2



ใบอนุญาต สถานะการผลิตเครื่องมือแพทย์

เลขที่ : กก.สพ.25/2566

เลขที่ใบจดแจ้ง

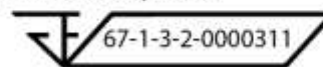

บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูได้ที่ : www.thaifp.com / www.anusornbestsafe.com



เบสโตเซฟ
BESTSAFE
Your Safety Solution

หน้ากากพับทบ | MEDICAL GRADE ใช้เพื่อการแพทย์ [BS-301-302]

PACKAGING



BESTSAFE N95 - SURGICAL

วิธีการเก็บรักษา

- ตรวจสอบหน้ากากอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าหน้ากากอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- เก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย แสงแดด ฝุ่น ความร้อน ความชื้น และสารเคมีที่เป็นอันตราย
- กรณีที่ใช้จนแล้วแต่ยังไม่ถึง ให้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้เก็บไว้ในถุงผ้า หรือถุงพลาสติก

วิธีการใช้

- ควรจับบริเวณด้านนอกเพื่อประกอบหน้ากากให้ตรงกับใบหน้า และดึงสายสวมทั้งสองข้างคล้องหูให้ กระชับ
- กดแถบสอดให้แนบสนิท
- ดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง

อายุการใช้งาน 3 ปี



บริษัท อานุสรณ์ เบลเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.BESTSAFE.COM / WWW.ANUSORN.BESTSAFE.COM



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution

อย.ไทย | THAILAND FDA

ดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดทาง MEDICAL

บริษัทฯ ขอเชิญ ผลิตตามข้อกำหนด อย. ไทย สามารถตรวจสอบได้ผ่าน link
https://www.fda.moph.go.th/?cate=DATA_ALL&type=&f=1&w=bestsafe



ผลิตภัณฑ์ BESTSAFE
 ดำเนินการผลิตตามข้อกำหนดทาง MEDICAL
QUALITY CONTROL
 GMS - ISO - MEDICAL SYSTEM CERTIFICATE
 ISO9001, ISO14001, ISO13485



MASK BESTSAFE SERIES: BESTSAFE-MR
 MEDICAL + HOSPITAL AND MULTI PURPOSE USE



ผลการทดสอบตามมาตรฐานไทย



ผ่านตามข้อกำหนดในการกรองอนุภาค ทาง MEDICAL+ INDUSTRIAL



ผ่านตามข้อกำหนดการทาง MEDICAL+ INDUSTRIAL



FOLDED MASK ผลิตตามข้อกำหนด มาตรฐาน
 TIS 2424 - 2562



ทดสอบตามข้อกำหนด มาตรฐาน
 TIS 2424 - 2562



FLOOD FLAT MASK : หน้ากากชนิดแบบพับทบ

ISO 15184 (2016) (PPE)	BFE	PFE	VFE
ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)

MATERIAL CERTIFICATION

MATERIAL : MELTBLOWN

ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------	------------------------

MATERIAL : SPUNBOND

ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------

MATERIAL : SPUNBOND

ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------	------------------------

MATERIAL : SPUNBOND

ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------	------------------------

PACKAGING : FOOD PRODUCT AND FOOD CONTACT MATERIAL

ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------	------------------------

POLYESTER BUNGEY

ISO 15184 (2016) (PPE)

PLASTIC METAL NOSE WIRE

ISO 15184 (2016) (PPE)

FLOOD FLAT MASK : หน้ากากชนิดแบบพับทบ : สินค้าได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน



ผลการทดสอบกับผิวหนัง (SURGICAL MASK)



BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
PART 1: TESTS FOR IN VITRO CYTOTOXICITY,
ISO 10993-5:2009(E).

ISO 10993-5:2009(E)

BIOLOGICAL EVALUATION OF MEDICAL DEVICES
PART 10: TESTS FOR IRRITATION AND SKIN SENSITIZATION,
ISO 10993-10:2016(E).

ISO 10993-10:2016(E)

SKIN IRRITATION TEST IN NEW ZEALAND WHITE RABBITS
TESTS FOR IRRITATION AND SKIN SENSITIZATION,
ISO 10993-10:2016(E).

ISO 10993-10:2016(E)

ผ่านการทดสอบผิวหนังกับ
ตัวชี้วัดทางการแพทย์ MEDICAL



ISO 10993-5:2009

ผ่านตามข้อกำหนดในการกรองอนุภาค ทาง MEDICAL+ INDUSTRIAL

BESTSAFE MASK
FFP2 | KN95 | GB 2626



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

FFP2 | KN95



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

ผ่านตามข้อกำหนด



ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)	ISO 15184 (2016) (PPE)
------------------------	------------------------	------------------------



บริษัท อานุสรณ์ เบริสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD
www.thaiappc.com / www.anusornbestsafe.com



วิธีการใช้งาน และข้อแนะนำ ยี่ห้อ BESTSAFE



FOLDED MASK
หน้ากาก ชนิดแบบพับเก็บ



1. ควรใช้งานตามข้อจำกัดของหน้ากาก เพื่อช่วยลดและป้องกันไม่ให้น้ำไปสู่การเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

2. ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน และก่อนใส่ควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่เทคนิคสอน วิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี

เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานแผนกเซฟตี้ และมาตรฐานของสุขภาพ

3. ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่สามารถเพิ่มปริมาณ OXYGEN ควรใช้งานในที่อากาศปลอดโปร่ง

4. ควรเปลี่ยนหน้ากากนี้เมื่อ

- A. เริ่มหายใจไม่สะดวก กรณีเนื่องจากการอุดตันเกินความสามารถในการป้องกัน ของหน้ากาก

- B. กรณีหน้ากากมีการชำรุดหรือเสียหาย

5. ควรนำออกจากพื้นที่ กรณีเลิกใช้งาน เพราะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง หรือผลเสียที่อื่นๆตามมา

6. ควรเก็บหน้ากากไว้ในกล่องบรรจุให้ห่างจากแสงจนกว่าจะเริ่มใช้งาน

7. ผู้ใช้งานควรทำการ FIT TEST หน้ากากก่อนใช้งานทุกครั้งแบบ QUALITATIVE หรือ แบบ QUANTITATIVE

โดยอ้างอิงวิธีการทำการทดสอบควรเป็นไปตาม 29CFR 1910.134

8. ก่อนทำการสวมใส่หน้ากากควรมีการตรวจสอบคุณภาพในการแตกหรือมีจุด ชำรุดก่อนใช้งาน ถ้าใช้ควรเปลี่ยนหน้ากากชิ้นใหม่โดยทันที

9. ควรเก็บหน้ากากที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในกล่องและเก็บในพื้นที่แห้ง ปลอดสารปนเปื้อน และอุณหภูมิ +5 ถึง 38 องศา ซึ่งการจัดเก็บมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่โรงงานผลิต



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



1. ถอดหน้ากากไว้ตำแหน่งบริเวณใกล้จมูกและปากของผู้สวมใส่

2. ดึงสายรัด และคล้องไปที่บริเวณหู (กรณีแบบคล้องหู)

หรือดึงสายรัดหลังศีรษะ (กรณีแบบคล้องหัว)

3. ใช้มือทั้ง 2 ด้าน ปรับขนาดของหน้ากากบริเวณ NOSE CLIP รอนๆงมูก

4. ดึงสายรัดปรับระดับให้เข้ากับรูปใบหน้า

5. ตรวจสอบ SEAL CHECK ความแนบกระชับของใบหน้า

ตรวจสอบความแนบแน่นกรณีที่ไม่ใช้ว่าส่วหายใจออก ด้วยการจับหน้ากากและ ปิดรอบๆหน้ากาก

ตรวจสอบความแนบแน่นการหายใจเข้า แบบ NEGATIVE PRESSURE

โดยไม่มีอากาศ LEAK เข้าไปในหน้ากากขณะหายใจเข้า

ตรวจสอบหน้ากกว่ามีอากาศเข้าไปภายใน ให้มีการปรับแก้ไขให้ได้ตำแหน่งพร้อมปรับ สายรัดอีกครั้ง

ตรวจสอบความแนบแน่นกับใบหน้ากรณี ที่ปลายขอบรัดไม่เข้ารูป ปรับตำแหน่งอีกครั้ง เพื่อให้แนบสนิทขึ้น

6. ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที กรณีที่มีการหายใจเริ่มยากและทรงเสียรูป

7. ควรเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทันที กรณีขึ้นการแนบกระชับแยลง

8. ควรระมัดระวังและทำตามข้อแนะนำให้ใช้งานหน้ากากอย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดการใช้งาน

1. ไม่ควรใช้งาน เนื่องจากหน้ากากปนเปื้อนในพื้นที่ข้อจำกัดดังต่อไปนี้
 - A) ATMOSPHERE CONTAINS LESS THAN 19.5 % OXYGEN
 - B) ถ้าได้รับกลิ่นหรือรับรู้ให้เปลี่ยนออกทันที
 - C) สามารถใช้ปกป้องแก๊สและไอระเหยเบื้องต้น
 - D) กรณีสารพิษมีความเข้มข้นสูงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยทันที IDHL ให้ยกเลิกใช้งานทันที

- E) ความเข้มข้นเกินข้อกำหนดสามารถอ้างอิง ตาม OSHA

ข้อจำกัด PEL ไม่เกิน 10 เท่า หรือต่ำกว่าเท่านั้น


-) ไม่เหมาะกับการนำไปใช้สำหรับงานพันทราย หรือยิงทราย ฟันสี และทำงานกับสาร ASBESTOS (ไฟเบอร์ขนาดเล็ก)

แนะนำให้ใช้ หน้ากากดัดबरองแทน


- G) การนำไปใช้งานสำหรับบรรยากาศที่เกิดการระเบิดได้

2. ไม่ควรใช้งานหรือปรับปรุงหน้ากาก หรือดัดแปลงต่างๆ


3. ไม่ควรใช้งานหรือสวมใส่หน้ากากกับใบหน้าที่มีหนวดเคราหรือเส้นผมยาว หรืออื่นๆที่ทำให้การสวมใส่ไม่แนบสนิท

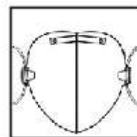

See information
supplied by the
manufacturer

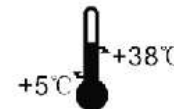

Temperature range
of storage
conditions

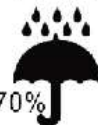

Maximum relative
humidity of storage
conditions

คำเตือน

หน้ากากสามารถช่วยป้องกันฝุ่นและละอองปนเปื้อนได้ แต่ไม่สามารถกำจัด
การหายใจได้ เพียงแต่ช่วยในการความเสี่ยงอันตรายในการป้องกัน
และปกป้องไม่ให้ติดเชื้อ และเจ็บป่วย

ถ้าใช้ผิดประเภทอาจส่งผลกระทบต่อถึงเจ็บป่วย ถึงขั้นเสียชีวิต



บริษัท อานุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO. LTD.
Unit 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



COMPANY PROFILE



WWW.PIYAMANEEGARMENT.COM

บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด

PGM Always support your needs

ISO 9001 | 14001 | 13485



บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด
PIYAMANEE GROUP CO.,LTD

สำนักงานใหญ่ (Head office)

52/40 ถ.วัดโชดหิน-เขาไฟ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
52/40 Watkodhin-Kaophai rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

โรงงานผลิต (Factory)

36/9-10 ถนนเสม็ดแดง ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
36/9-10 samed daeng rd. T.Tubma, A.Muang Rayong, Rayong. 21000

TEL (+66)038-949880 #1341-1343

Website : www.PiyamaneeGarment.com

Email : Garment@piyamanee.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0215564009302



COMPANY PROFILE



UNIFORM | INDUSTRY | FIRE | MEDICAL | CLEANROOM

PGM Always support your needs



Mask Goggles Cap ESD UNIFORM Blue Cover SDO - Cap Working glove Shovel Leg protection Apron Body support Knee support UNIFORM INDUSTRIAL WORK WEAR FIRE-RESISTANT UNIFORM



PPE KIT HY-ALUMINUM UNIFORM CHEMICAL RESISTANT PAINTING UNIFORM FIRE GEAR SUIT FIRE TRAINING SUIT PRINT BAG SCREEN FLEX EMPLOYER WAREHOUSE BEST TOTE bag Shopping bag POUCH bag



PRODUCTS MADE IN THAILAND



PGM GREEN INDUSTRY :

เรามุ่งมั่นสนับสนุนในการใช้วัสดุลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก
ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อยู่คู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองมาตรฐานการผลิต | เอกสารโรงงาน



SME



MADE IN THAILAND



BOI



ใบ สอ.4



บริษัท ปิยะมณี กรุป จำกัด

PGM Always support your needs

ISO 9001 | 14001 | 13485



บริษัท อานุสรณ์ เบลล์เซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO., LTD.
www.thaiappc.com | www.anusornbestsafe.com



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution



บริษัท อนูสรณ์ เบสเซฟ จำกัด
ANUSORN BESTSAFE CO.,LTD
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร 10110
www.thaisafety.com / www.anusornbestsafe.com



PPE



GARMENT



FABRIC PPE



LUNA STUDIO



UNIFORM



MASK



KNITTING GLOVE



LAUNDRY



CHEMICAL



FIRE GEAR



EXTINGUISHER



CONFINED



DETECTOR



HIGH PPE



HIGH SYSTEM



ELECTRICAL



LOTO



MAINTENANCE



PPTC Training



ベストセーフ
BESTSAFE
Your Safety Solution